

Så stödjer PersonalFit™ PLUS för Symphony® sjukhusens hygienrutiner

Säker uppsamling av bröstmjolk

På sjukhus är det avgörande att bröstmjölken skyddande egenskaper bibehålls och att kontamineringsriskerna minimeras. Det är ett av skälen till att det är så viktigt att uppsamlingen av bröstmjolk kan ske på ett så hygieniskt sätt som möjligt.

Medela erbjuder följande sortiment med PersonalFit™ PLUS för sjukhus för att kunna uppfylla olika hygienbehov, resurser och policyer. De två endygnsversionerna kan användas direkt efter upppackning.



Sterila engångsversioner

Validerade i enlighet med tillämpliga standarder för sterila medicintekniska produkter och certifierade som sterila under hela sin livslängd.

Ready-to-Use endygnsversioner

Tillverkade och förpackade i ett renrum, mikrobiologiskt testade före frisläppande.

Återanvändningsbart pumpset

Kan steriliseras och autoklaveras och därmed användas av flera olika mammor.

Underlättar hygienisk hantering

PersonalFit™ PLUS pumpset är även utformade för att minimera behovet av hantering vid montering och användning.



Kom-ihåg-hjälp

På förpackningen till endygnspumpseten finns en dekal med enkla steg-för-steg-anvisningar som ger en snabb påminnelse om hur pumpsetet ska användas på ett säkert sätt.




Översvämningsskydd

Denna funktion, som även kallas slutet system, ökar hygienien vid användning av PersonalFit™ PLUS, eftersom membranet förhindrar att mjölk kommer in i slang eller motorn.

Bästa praxis vid pumpning

Det är viktigt att man inte äventyrar hygien hos PersonalFit™ PLUS genom att hantera det på fel sätt. Innan pumpningen påbörjas eller pumpsetet vidrörs ska användaren:

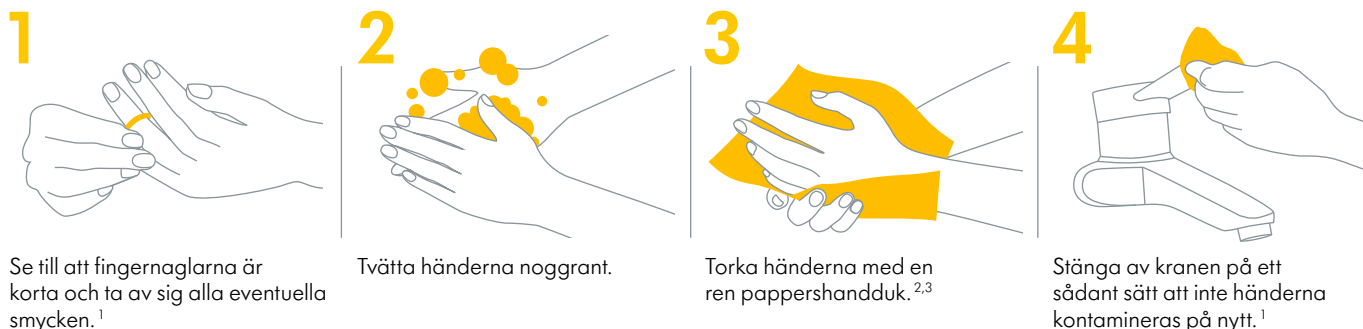

Se PersonalFit™ PLUS-sortimentet på medela.se/pfp och hitta mer information på medela.se/utbildningsmaterial

Referenser 1 Pittet D et al. Infect Control Hosp. Epidemiol. 2009; 30(7):611–622. 2 Harrison WA et al. Am J Infect Control. 2003; 31(7):387–391. 3 Harrison WA et al. Am J Infect Control. 2003; 31(2):104–108.