

Basic



HÖG KVALITET FRÅN SCHWEIZ



Basic – kirurgisk sugpump

Basic


Sugumpumpen med schweizisk genialitet och enkelhet

Ger tillförlitlig och enkel sugning med god hygien. Basic är en tillförlitlig och lättanvänd sugpump för alla användningsområden på sjukhus, kliniker och läkarmottagningar där en hög vakuumnivå krävs som vid t.ex. endoskopi, sugning av luftvägar, kejsarsnitt/förlossning med hjälp av sugpump och sårdränage.

Så enkelt som möjligt. Under utvecklingen av sugpumpen Basic strävade Medela efter enkelhet. Starta pumpen antingen med fotpedalen på stativet eller med knappen på höljet. Justera suget med den intuitiva vakuumregulatorn med membran. Tillbehör kan anslutas vid behov. En enkel invändig konstruktion minimerar arbetet med rutinkontroller och sparar pengar.


Den bara går och går. Medelas schweiziska genialitet har skapat den långa livslängd som gjort våra pumpar berömda. Företagets know-how, hållbara material och smarta utrustning bidrar till tillförlitligheten hos sugpumpen Basic.

En fråga om hygien. Hygienfrågor påverkade både utformningen och funktionen hos sugpumpen Basic och dess tillbehör. Medela har lagt extra vikt vid placeringen och utformningen av drifelementen för att minimera riskerna för kontaminering.

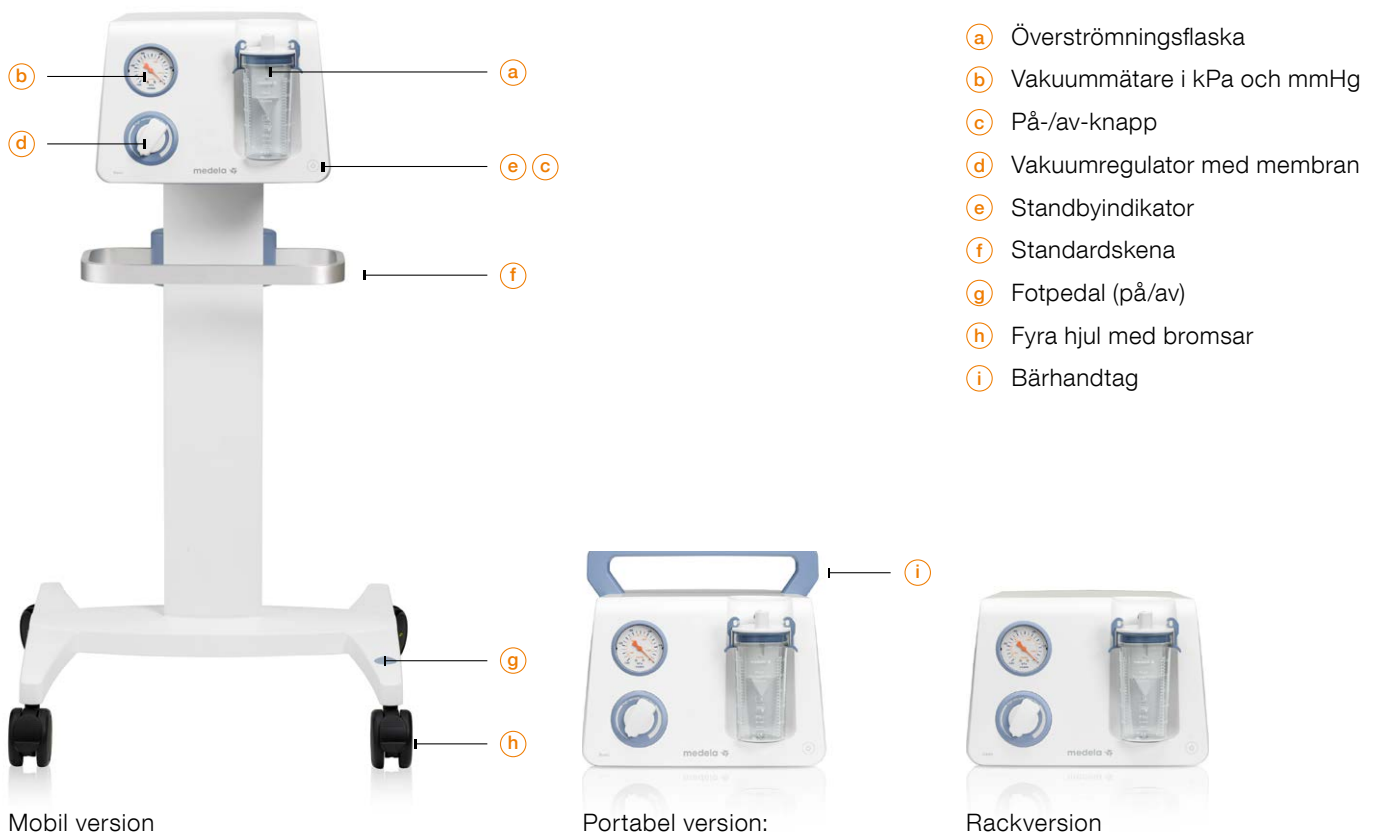

Tillförlitlighet – tillverkad i Schweiz

Utifrån Medelas mer än 50 års erfarenhet inom medicinsk sugteknik har vi gjort drivenheten i sugpumpen Basic ännu bättre. Cylinderns värmeresistenta, högteknologiska material ger en långlivad, tillförlitlig drift. En plattfjäder med patenterad teknik är bara en av många finesser i den här pumpen.

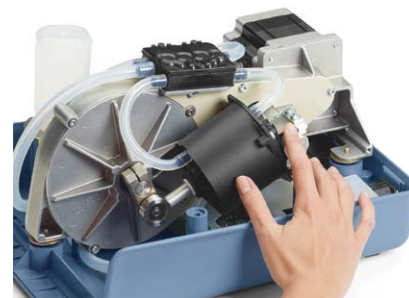

Högkvalitativa, hållbara komponenter

Hygienfaktorer

Husets rundade design i ett stycke underlättar rengöring. Valet föll på material som klarar av att stå emot kraftiga desinfektionsmedel. Med CleanTouch-knappen på höljet kan du slå av och på pumpen med en enkel knapptryckning: inga mellanrum, inga spår. Fotpedalen som är integrerad i stativet gör att du har händerna fria.



Hygienisk husdesign i ett stycke

Sofistikerad enkelhet

Medelas sugpump Basic är hygienisk, tillförlitlig och enkel att använda. Vakuumpregulatorn med membran bygger upp trycket inom några sekunder, vilket gör att sugpumpen är lämplig för användningsområden som kräver snabb sugning och tyst drift. Pumpen finns i rackversion, portabel version samt mobil version för enkel placering i endoskopistapar, vid sidan om patientsängen eller i operationssalen. Komplettera enheten med engångs- eller flergångssystem för uppsamling av vätska från Medelas stora tillbehörssortiment.



Alla driftelement finns på framsidan av pumpen

Fördelar

- Basic är en tillförlitlig, hygienisk och användarvänlig sugpump.
- Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess ger mekanisk precision och perfekta prestanda.
- Enkel konstruktion och lätt att komma åt interna delar för att minimera arbetet vid rutinkontroller.
- Tillförlitlighet tack vare teknik anpassad till moderna behov, hållbara material, reducerad andel slitagedelar.
- Ett stort utbud av tillbehör skapar ett komplett system som kan anpassas efter dina individuella behov.
- 5 års garanti.

Tillbehör

Engångssystem för uppsamling av vätska

Engångssugutrustning och PC-flergångsflaska bidrar till hygienisk, enkel hantering och effektiv vätskehantering. Storlekar: 1,5 och 2,5 liter.



Slangsortiment

Tillverkad av silikon eller PVC.



Flergångssystem för uppsamling av vätska

Autoklaverbara PSU-flaskor och lock för enkel och ekonomisk uppsamling av sekret. Storlekar: 1, 2, 3 och 5 liter.



Fotstyrd vakuumregulator för vakuumreglering utan att använda händerna

Kan anslutas till Medelas sugflaskor.



Filtersortiment

För att skydda pumpen från överströmning, miljön från bakterier och neutralisera lukt.






Fotpedal (på/av-knapp)



Kabellängd 3,5 m.






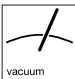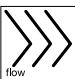


Komplettera Basic-pumpen med Medelas tillbehör för flexibilitet samt enkel användning.

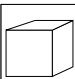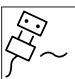Tekniska data
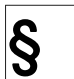
| | |
|---|---------------------------------------|
|  vacuum | høgt vakuum - 90 kPa - 675 mmHg |
|  flow | høgt fløde 30 l/min. |
|  kg | 9,3 kg (rackversion) |

| | |
|---|---|
|  | H x B x D (rackversion) 210 x 305 x 375 mm |
|  | Effekt 100-240 V |
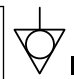
| | | | | |
|---|---|---|---|------|
|  | ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEG), IIa 5 års garanti |  | | |
|  |  |  |  | IP21 |

Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Lokal kontakt:

Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 (0)8 588 03 200
Fax +46 (0)8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se